



Heartee



Heartee Infinity

Heartee

因美丽而诞生的全身美容仪

弹力、光泽 实感

全身美容仪器
[Heartee Infinity]
ハーディーインフィニティ



一台有 4 种功能



「Infinity」的特征

[Infinity] 是专业的美容院根据多年来的经验开发的，新开发的 625nm 的 LED 光是与药科大学共同研究取得的证明。

每个功能可根据按摩部位能接受的强弱程度（5 个档位）来调整。

一台有 4 种功能！

[Infinity] 是由多级射频的 9 个大的电极间促进皮肤内部深层水分子的旋转，使之加热作用于想要护理的肌肤部位缓解肌肤。

○ 产生效果稳固的 LED 光

○ 按摩球（电极）

○ 配置大面积的电极按摩球

[Infinity] 通过美容成分向皮肤导入微弱的电流实现离子化，有效地渗透到真皮层的纤维芽细胞中

ION
(离子导入)

[Level 1~5]

LED
コラーゲンライト
625nm

RF
(射频)

[Level 1~5]

EMS
(低频频)

[Level 1~5]

[Infinity] 的 EMS 是指通过电流产生的低频其作用于肌肤的深部，可有效地活动肌肉使用在肌肤期待的地方，能有效地提拉紧致收缩肌肉另外，肌肉活动能够使肌肤变得更加柔软，血液循环也将更好因新陈代谢上升而积蓄在体内的代谢物质将更容易排出，肌肤能够再生弹力，引导皮肤年轻态。


● [Infinity] 的 LED

促进胶原蛋白合成的效果提高了约 40%。

在日本药科大学的协助下，进行的关于新开发的 625nm LED 光使用人的纤维芽细胞来生产胶原蛋白，其产量的对比实验结果表明，促进胶原蛋白合成的效果提高了约 40%。



纤维芽细胞对胶原蛋白合成的作用

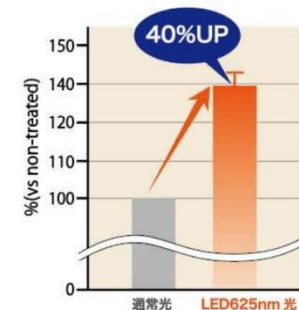

日本药科大学 山本博之博士研究的图标数据摘要 [Infinity] 的 LED 光 625nm 用了 7 天时间 (1 天 15 分钟) 是照射了人的纤维芽培养细胞的测量结果的图表。

○ 共同研究的日本药科大学（埼玉院校）



「药学专业」（6 年制：健康・中医・医疗药学课程）、「医疗商务药学专业」（4 年制：运动药学课程）在日本首次设置了专门针对中医的“中药学科”，引起了广泛关注。西方医学和东方医学融合的“统一医疗的实现”作为教育理念，在大学内设置了“临床药学教育中心”。同时，各种各样的生药标本和东方医学・中医的资料等在学校「中医资料馆」内展示。「中医资料馆」为普遍开放。（来自维基百科）

生命科学药学领域 准教授 山本博之博士研究及试验委托。

「Infinity」有效的使用方法

一台「Infinity」就能满足您的全身护理!

在要使用的部位涂上水分充分滋润的润肤凝胶后再使用Infinity能更切实地感受到效果。

脸部护理

用RF把脸颊周围的肌肤软化后,再使用EMS从下巴向耳朵方向一边按摩一边作用提拉。



上臂护理

用RF从胳膊的肘到腋下慢慢地流动数次后再用EMS来刺激肌肉。



锁骨护理

用RF从耳下线开始到颈部来回,肩膀周围、锁骨的地方慢慢地向腋下流动之后,再用EMS收紧。



胸部护理

用RF和缓胸部周围后,再用EMS刺激大胸肌。



腿部护理

用RF作用于在意的几个部分,分别慢慢地流软了之后,再用EMS按摩。特别硬的位置推荐RF使用多次后再做EMS。



腰部护理

用RF柔软腰部周围肌肤后再用EMS从腹中心向小肚子滑动,一边按摩一边刺激外腹斜肌。



Heartee

■ 使用方法

FACE Level F1- F2- B1



请涂满润肤凝胶干燥的皮肤是不能有效的通电的。



请将 Heartee Infinity 沿着脸部线缓缓从下往上移动。

BODY Level B1- B2- B3



请给身体需要使用 Infinity 的各个部位涂上润肤凝胶后再用 Heartee Infinity 来做按摩。

■ 各部分的作用



○ 宝石把手
用食指和中指夹住珠宝把手使用。



○ 模式灯
ION/RF/EMS 的启动灯



○ 模式级别开关
● 选择 ION/RF/EMS 模式 ON/OFF 开关
● 选择 Level 1-5 级别



○ 级别灯
启动 Level 1-5 级别的灯

※ 配合使用另售的“美人鱼之泪乳液”能起到更好的美容效果。



■ Heartee 美人鱼之泪乳液 100g
适合敏感肌的天然成分乳液

■ 产品参数

尺寸 ----- 90 * 120 * 75mm
重量 ----- 190 g
电压 ----- 100~220v
充电接口 ----- USB type-C
充满电时间 ----- 180 分
连续使用时长 ----- 60 分
使用电池 ----- 锂离子



充电类型

○ 美容仪器器

○ 电源插脚

○ 电源插头

